


Réf. : 100011A

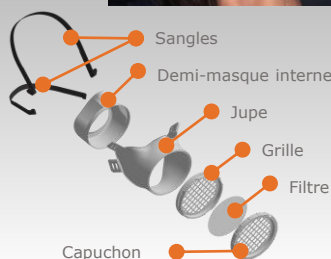

Description

Le masque OCOV® :

- Dispose du **marquage CE** conformément aux exigences de la **Directive 93/42/CEE**
- Est **dispositif médical de classe 1 type II** conformément à la norme **EN 14683:2019**
- Est **homologué par la DGA/DGE** en tant que masque alternatif de **catégorie 1 (UNS1)**.

A la différence d'un masque de type FFP (*Face Filter*) constitué uniquement d'une matière filtrante, le masque OCOV® comprend une pièce **faciale souple** qui recouvre le nez, la bouche et le menton, dans laquelle sont insérés des **filtres remplaçables**.

La pièce faciale souple épouse la forme du visage et minimise donc le taux de fuite par rapport aux masques jetables ou aux masques alternatifs en tissu. OCOV® permet ainsi :

- Un **niveau de protection élevé** grâce à un **taux de fuite au niveau du visage très faible (<2%)**. Il assure une bonne étanchéité entre l'atmosphère ambiante et le visage du porteur (que sa peau soit sèche ou humide et lorsqu'il bouge la tête).
- Un **excellent confort au porté** longue durée

Il est composé de :

- **Une jupe en plastique souple**, facilement nettoyable, ergonomiquement conçue et testée pour être portée plusieurs heures sans gêne.
- **Un demi-masque interne souple** qui assure une étanchéité optimale avec le visage du porteur
- **Deux sangles** d'attache tête et cou.
- **Un filtre** qui protège contre les particules et les aérosols.
- **Une grille et un capuchon** pour maintenir le filtre.



Avantages

- Le masque OCOV® est livré avec un sachet de filtres permettant **100 utilisations**. OCOV® peut être utilisé au choix avec :
 - **Des filtres réutilisables « R » catégorie 1/P1** désinfectables 20 fois, disponibles par sachet de 5 filtres permettant 100 utilisations.
 - **Des filtres non réutilisables « NR » catégorie 1/P1** disponibles par sachet de 100 filtres.
 - **Des filtres non réutilisables « NR » P2** disponibles par sachet de 100 filtres.
- Le masque OCOV® est une **alternative durable** aux masques jetables et aux masques alternatifs lavables :
 - **Protection supérieure** : épouse la forme du visage et minimise les fuites
 - **Confortable** : forme ergonomique, aisance respiratoire et facilité à parler
 - **Plus économique** : remplace plus de 100 masques jetables, empreinte logistique plus faible.
 - **Impact écologique** bien moindre : moins de volume, moins de transport, moins de déchets
 - **Solutionne les risques d'indisponibilité** dans les phases de crise : **100 jours d'autonomie**

Caractéristiques techniques

Paramètres :	Normes :	Résultats :	Classement :
Efficacité de filtration microbienne (EFB) 3µm	EN 14683	> 99%	Dispositif médical classe 1 type II
Propreté microbienne	EN 14683	< 30 ufc/g	
Taux de filtration des particules 3µm	DGE/DGA	> 99% - Catégorie 1	UNS1 – masque alternatif catégorie 1
Perméabilité à l'air	DGE/DGA	> 96 L.m ⁻² .s ⁻¹	
Taux de filtration des particules 0,1µm	EN 1827	> 80%	Equivalent à FMP1 selon EN 1827
Taux de filtration des particules 0,1µm	EN 1827	> 94%	Equivalent à FMP2 selon EN 1827 <i>Résultat valable pour le filtre « NR » P2 uniquement</i>
Taux de CO2 inhalé	EN 1827	< 1%	Conforme EN 1827

- Durée maximale d'utilisation d'un filtre avant remplacement ou désinfection : **1 filtre par jour** (prévoir plusieurs filtres par jour en fonction du taux d'humidité)
- Le masque est compatible avec les équipements de protection individuelle casques et lunettes (**ne créé pas de buée**).

Informations complémentaires

- **Taille unique**
- Durée de vie : **5 ans**
- Poids : 115 g
- Sans latex
- Pas d'atténuation de la voix

Références articles

• Kit individuel OCOV® masque + 5 filtres réutilisables cat.1/P1 :	Réf. 100011AB
• Kit individuel OCOV® masque + 100 filtres non réutilisables cat.1/P1 :	Réf. 100011AD
• Kit individuel OCOV® masque + 100 filtres non réutilisables P2 :	Réf. 100011AE
• Sachet de 5 filtres OCOV® réutilisables cat.1/P1 :	Réf. 111014AA-U
• Sachet de 100 filtres OCOV® non réutilisables cat.1/P1 :	Réf. 111015AA-U
• Sachet de 100 filtres OCOV® non réutilisables P2 :	Réf. 111016AA-U

Entretien

- Masque:** Appliquer un **spray d'alcool** ou une **lingette de solution virucide** après un éventuel nettoyage par trempage du masque dans une eau savonneuse pour les masques très sales (sang, sécrétions, graisse...).
- Filtres réutilisables:** **Traitement thermique 1h à 75°C ± 5°C** : dans un sèche-linge (mettre les filtres dans un filet de lavage) ou séchage à plat dans un four ou dans un autoclave (mettre les filtres dans un sachet hermétique et bien régler l'autoclave à 75°C ± 5°C)

« **Ils nous protègent, nous les protégeons** »